



DYNA *BLAST*™

DYNA *GRAFT·D*™

MEJOR FORMULACION DE INJERTO OSEO

MANEJO SUPERIOR DEL INJERTO OSEO

Preparado. Listo. A Crecer.

No solo productos de rendimiento.


Productos de rendimiento seguro.

SELECCIÓN Y EVALUACION DE DONANTES

- La historia médica y social del donante potencial de tejidos es rigurosamente analizada para asegurar la capacidad del donante potencial.
- Cada lote de hueso es obtenido de un solo donante humano y no es mezclado con otros donantes.
- Obtenemos huesos solamente de bancos de tejidos, los cuales son suplidores que cumplen con todos los estándares y regulaciones de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Estados Unidos, la Asociación Americana de Bancos de Tejidos (AATB) y la Enmienda para las Mejoras de los Laboratorios clínicos (CLIA).

ANALISIS SIN PARELO

- Cada lote de DBM de tejido alógeno usado por Keystone Dental ha sido cuidadosamente analizado mediante estudios in vitro para asegurar sus propiedades osteoconductoras.
- Todo alógeno debe generar un nivel de fosfatasa alcalina significativamente más alta que el umbral establecido

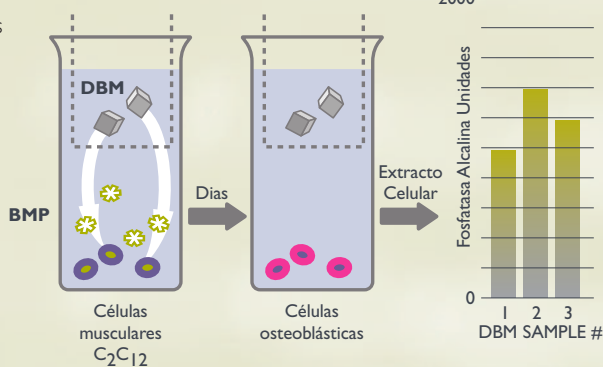

- Fosfatasa alcalina es una enzima que sirve como un indicador de la actividad osteoblástica.
- Lotes de un solo donante son los únicos lotes que Keystone Dental produce.

PROCESAMIENTO Y ESTERILIZACION DE INJERTOS

- Injertos alógenos son procesados en habitaciones limpias donde el aire es filtrado con filtros HEPA, analizado ambientalmente y biológicamente.
- Esterilización de los injertos es establecida a través del tratamiento por un haz de electrones (e-beam) después de envasados para destruir cualquier micro-organismo, sin afectar negativamente la bioactividad de nuestros productos con DBM



Cuando vaya a seleccionar una Matriz de Hueso Desmineralizado recuerde que no todos los productos son creados igualmente. Para rendimientos clínicos y resultados excelentes en los pacientes, la calidad del hueso y su habilidad de rendimiento son los que verdaderamente cuentan. Con los sustitutos de injertos óseos de Keystone Dental, nuestros productos están preparados, listos para establecerse a la temperatura del cuerpo y van a crecer.

Productos de injerto óseo
muy bien analizados ofrecen
máximo rendimiento con
simplicidad de

FORMULACIONES UNICAS

Nuestros productos con DBM tienen características de formulación que incorporan procesos muy estrictos para hueso cortical humano y un transportador biocompatible propio que responde a los cambios en temperatura.

OSTEOCONDUTIVIDAD CONFIRMADA

Muy distinto a otros fabricantes, cada lote de DBM de Keystone Dental es rigurosamente analizado para confirmar que contiene el nivel de osteoconductividad necesaria para la neoformación ósea.

MANEJO SUPERIOR

Todos nuestros productos DBM incorporan el Medio de Fase Reversible (MFR) biocompatible que produce un injerto altamente flexible y fácil de manipular, moldear o colocar en cualquier defecto óseo.

DYNA *BLAST*™

Matriz Ósea Desmineralizada con Hueso Esponjoso

DynaBlast es un producto óseo compuesto que combina elementos osteoinductivos y osteoconductivos en un Medio de Fase Reversible propio.


Esta poderosa solución 2 en 1 combina:

- Hueso desmineralizado, el cual estimula el crecimiento de hueso nuevo, y
- Partículas de hueso esponjoso, las cuales proveen una estructura natural de soporte para estimular la adhesión de células precursoras osteogénicas

Pasta



Masilla

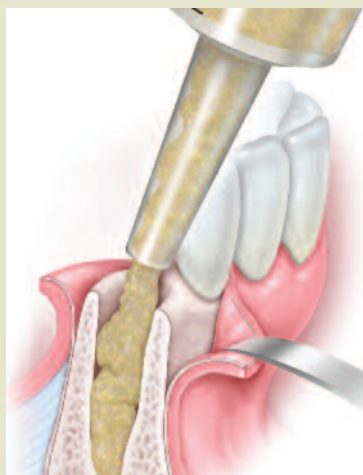

DYNABLAST PASTA EN UN ALVEOLO DE EXTRACCIÓN.



DYNABLAST MASILLA USADO CON UN IMPLANTE EN UNA DEHISCENCIA BUCAL.

uso.

CONTENCION EXCELENTE DEL INJERTO

Nuestros productos DBM aumentan su viscosidad a la temperatura del cuerpo humano y resisten la irrigación, minimizando la probabilidad de migrar del lecho quirúrgico.

APLICACIÓN LISTA-PARA-SER-USADA

Todos nuestros productos DBM están disponibles para ser usados inmediatamente sin refrigerar; descongelar; mezclar u otra preparación necesaria

DEFECTOS CLINICOS

	DYNABLAST	DYNAGRAFT • D
Alvéolos de extracción	■	■
Defectos periodontales		■
Dehiscencias de implantes	■	■
Defectos moderados y localizados del reborde óseo	■	■
Elevación senos nasales	■	
Desarrollo de espacio para implantes	■	■
Defectos alrededor de coronas en implantes inmediatos	Pasta Solamente	Gel Solamente

DYNA GRAFT-D™

Sustituto de Injerto Dental óseo Osteoconductor

DynaGraft-D es un sustituto de injerto compuesto de un alto contenido de una Matriz de Hueso Humano Desmineralizado (DBM) en un Medio de Fase Reversible que está diseñado para estimular la formación natural de hueso. Disponible en forma de masilla y gelatina, DynaGraft-D puede ser usado sólo o como expansión de injerto indicado para aumentar o para tratamientos reconstructivos del reborde óseo.



Gelatina




Masilla




DYNAGRAFT • D GELATINA EN UN ALVEOLO DE EXTRACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA COLOCACIÓN DE UN IMPLANTE.

TIBIA DE CONEJO CON UN DEFECTO TRATADO CON DYNAGRAFT • D GELATINA

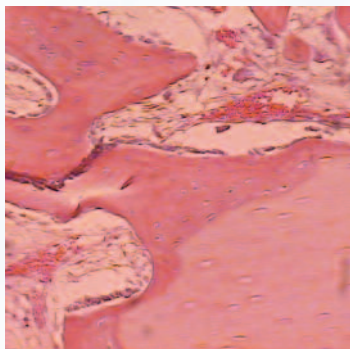

6 SEMANAS

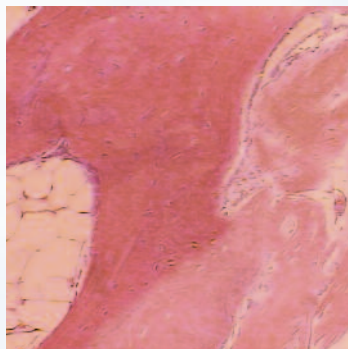

12 SEMANAS

Images at 100X magnification.

Micro-fotografía a las 6 y 12 semanas mostrando la neoformación ósea en un injerto con matriz de hueso alógeno desmineralizado

Información Para Ordenar

DynaBlast matriz de hueso desmineralizado con hueso esponjoso



Masilla (en frasco)

CATALOGO	VOLUMEN
10-220-1030	1cc
10-220-1040	2.5cc
10-220-1050	5cc

Pasta (en jeringuilla)

CATALOGO	VOLUMEN
10-210-1050	0.5cc
10-210-1060	1cc
10-210-1070	3cc

DynaGraft • D sustituto de injerto óseo osteoconductor



Masilla (en frasco)

CATALOG NO.	VOLUME
10-120-1050	1cc
10-120-1060	2.5cc
10-120-1070	5cc

Gelatina (en jeringuilla)

CATALOGO	VOLUMEN
10-110-1050	0.5cc
10-110-1060	1cc
10-110-1070	5cc

⚠️ Consulte el instructivo dentro del enrase para indicaciones, contra indicaciones, cuidados, peligros y uso.

Keystone Dental, Inc., es una compañía de dispositivos médicos para la salud oral con su casa matriz en Boston, Massachusetts. Fundada en Marzo del 2006, Keystone tiene como enfoque el desarrollar y comercializar productos dentales y servicios para el mercado de reemplazo de dientes.

Nuestra misión es proveer soluciones para la terapia del reemplazo de dientes que sean innovadoras, seguras, eficaces y con un coste efectivo donde el cuidado al paciente es nuestra primera y última responsabilidad. Keystone aspira a crear una marca líder en el mercado global reconocida por la comunidad dental por su integridad, reputación y compromiso para mejorar los estándares de cuidado de los pacientes y la calidad de sus vidas.



Tel 866.902.9272 Fax 866.903.9272
customersupport@keystonedental.com
Lunes a Viernes 8:30 AM-5:30 PM EST
www.keystonedental.com

Para información cómo ordenar comuníquese con: 866-902-9272 o visítenos en www.keystonedental.com